

CZ



ageLOC® Galvanic Body Spa

Důležitá upozornění

Předtím, než začnete, přečtěte si prosím následující důležitá upozornění:

1. Před každým použitím lázeňský přístroj pečlivě prohlédněte. Ujistěte se, že na něm nejsou žádné hrubé nebo poškozené plochy, ostré hrany ani bubliny. Pokud si všimnete čehokoliv neobvyklého, přístroj nepoužívejte a kontaktujte svou místní pobočku společnosti Nu Skin. Ukládejte na suchém místě při pokojové teplotě, minimálně však při 4 °C, aby se předešlo možnému vzniku bublin.
2. Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa je určen k použití pouze na nepoškozenou pokožku. Nepoužívejte na zanícenou nebo otevřenou ránu, pokud jste náchylní k růžovce, trpíte alergií na kovy nebo máte problematickou či přecitlivělou pokožku. Před použitím přístroje ageLOC® Galvanic Body Spa se poraďte se svým lékařem, pokud jste v jiném stavu, používáte kardiostimulátor nebo podobný přístroj, trpíte epilepsií, máte kovové implantáty, nebo v případě nemoci.
3. ageLOC® Galvanic Body Spa nepoužívejte na obličej nebo na jiné citlivé partie. Přístroj a přípravky jsou určeny pouze k zevnímu použití. V případě výskytu zarudnutí, otoku nebo abnormálního podráždění pokožky **přestaňte výrobek okamžitě používat a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.**
4. Noví uživatelé ageLOC® Galvanic Body Spa a lidé s citlivou pokožkou či s pokožkou náchylnou na alergie by vždy měli podle návodu produkt vyzkoušet na malé oblasti kůže, například za uchem nebo na vnitřní straně ramene.
5. Produkt používejte pouze pro účely, které jsou popsány v uživatelské příručce. Nepoužívejte déle než po doporučenou dobu nebo častěji než je uvedeno v příručce.
6. Před prvním použitím odstraňte všechny ochranné fólie.
7. Tento přístroj obsahuje baterie. Abyste snížili riziko šoku, popálení, požáru či poranění: neponořujte přístroj do vody. Neumísťujte ani neskladujte přístroj tam, kde hrozí riziko pádu či vtažení přístroje do vany, sprchy, umyvadla nebo záchodové mísy. Nepracujte s přístrojem, pokud byl poškozen. Nepoužívejte přístroj jakýmkoliv způsobem, který není popsán v uživatelské příručce.
8. Účelem tohoto rychlého návodu není poskytnutí veškerých informací potřebných pro provoz vašeho přístroje nebo pro provádění nanášení. Před použitím přístroje ageLOC® Galvanic Body Spa a doplňkových produktů si přečtěte uživatelskou příručku. Ta je k dispozici na CD-ROMu, který je součástí balení, nebo je dostupná v knihovně Office.


Pro správné nakládání s odpady spojenými s přístrojem ageLOC® Galvanic Body Spa a jeho baterií se ujistěte, že tak bude učiněno v souladu s platnými zákony nebo požadavky na likvidaci elektrických zařízení /baterií. Nelikvidujte jako všeobecný domácí odpad.

ageLOC® Galvanic Body Spa schémata a popisky

Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa – funkce a ikony na displeji.

Přístroj obsahuje:


- 1 Displej
- 2 Tlačítko pro zapnutí/
vypnutí
- 3 Pochromované
aktivátory
- 4 Prostor pro baterie (dvě
baterie AAA jsou již
vložené)
- 5 Vodivý povrch
ageLOC®

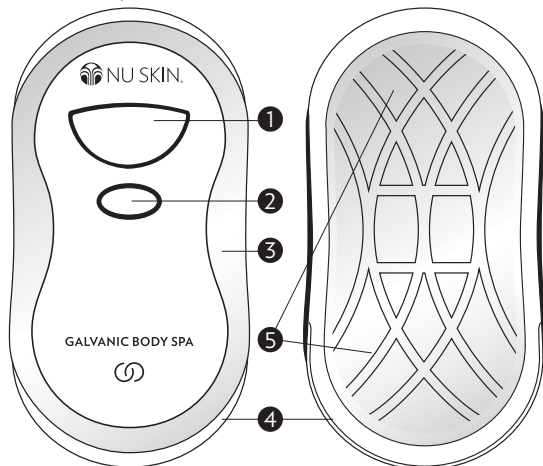

Ikony na displeji:

- 6 Indikátor stavu baterie – tato ikona se rozsvítí
v okamžiku, kdy budou baterie slabé.
- 7 Kroužky ageLOC® - tato ikona svítí, když je
přístroj v provozu.
- 8 Ikonka hodin a číslice 5 – tyto ikony indikují
délku ošetření, která je 5 minut.

Poznámka: Před prvním použitím přístroje
odstraňte nanášení ochranné fólie.

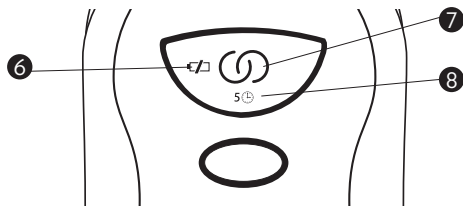

Instrukce krok za krokem

Jak používat váš přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa

1. Naneste ageLOC® Body Shaping Gel:

- a. Gel rozetřete v hojném množství na cílovou oblast. Gel nanášejte pouze na místo okamžitého zaměření.
- b. Zmáčkněte jednou tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Uprostřed displeje se objeví kroužky ageLOC®. Doba nanášení minut se také objeví pod kroužky ageLOC®.

2. Provedte aplikaci

Nejdříve si řádně navlhčete prsty a dlaň vaší ruky vodou nebo přípravkem NaPCA Moisture Mist. Držte přístroj řádně navlhčenou rukou a ujistěte se, že se vaše prsty dotýkají pochromovaných aktivátorů. Přiložte vodivý povrch k pokožce v místech, kde jste nanесли ageLOC® Body Shaping Gel. Uslyšíte 1, 2 nebo 3 pípnutí, protože nástroj automaticky nastavuje hladinu proudu, která nejvíce odpovídá typu vaší pokožky. Začněte jemně masírovat krouživými pohyby tam, kde byl nanesen produkt, a přístrojem pohybujte nahoru podél stehna, horní části paže nebo na spodní části břicha, a poté zpět dolů.

Přístroj bude pípat každých 10 vteřin na znamení, že je zapnutý a v provozu. Jakmile do konce aplikace zbývá 30 vteřin, přístroj bude pípat každých 5 vteřin až do jejího konce.

Nezapomeňte udržovat přístroj v neustálém kontaktu s pokožkou. Jakékoliv oddálení přeruší galvanický proud a tím i aplikaci. V takovém případě bude podsvícení displeje blikat a přístroj přestane pípat až do okamžiku, než bude obvod obnoven.

3. Ukončení aplikace

Na konci nanášení přístroj zapípá jednou dlouze a následovně dvakrát krátce na znamení, že je u konce. Ikona hodin a doba aplikace zmizí. Z pokožky odstraňte přebývající produkt. Vlhkým ručníkem setřete zbývající produkt také z přístroje a vodivého povrchu, řádně osušte. Nepoužívejte silné chemické čisticí přípravky nebo rozpouštědla, neboť ta by mohla produkt poškodit. Uchovávejte na suchém místě.

4. Pro ještě lepší účinky používejte také ageLOC® Dermatic Effects®, a to každý den ráno a večer. Před použitím si řádně přečtěte návod pro ageLOC® Dermatic Effects®.

Více informací ohledně aplikace naleznete v uživatelské příručce, která se nachází na CD-ROMu, jež je součástí balení přístroje ageLOC® Galvanic Body Spa nebo je dostupná v knihovně Office. Používejte výhradně dle instrukcí.